


ACCURO SUMER

SPRZĘT DO FIZJOTERAPII

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION



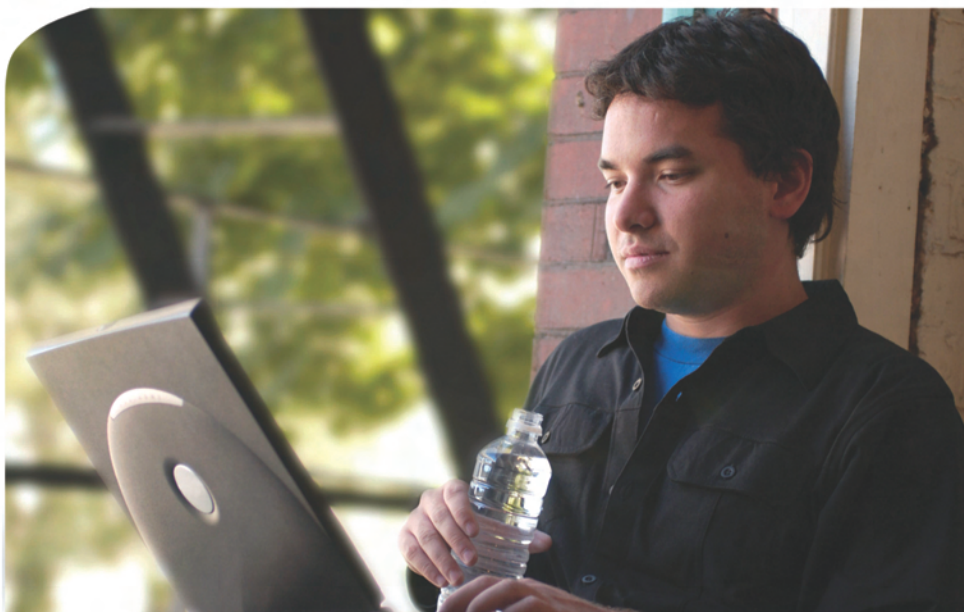

Chattanooga Group jest największym na świecie producentem sprzętu rehabilitacyjnego. W ciągu ponad 60 lat istnienia, Chattanooga Group ustanowiła niedościgniony wzór przywództwa, zaufania i doskonałości. Nasze produkty przyczyniają się do uzyskiwania lepszych efektów terapii w szpitalach, klinikach i domach na całym świecie. Przewodzimy branży fizjoterapii dzięki dawaniu przykładu, ciągłym innowacjom i dostarczaniu prawdziwie światowych rozwiązań dla lekarzy i ich pacjentów. Chattanooga Group jest częścią DJO Incorporated. DJO jest wiodącym, globalnym wynalazcą, producentem i dystrybutorem wysokiej jakości urządzeń medycznych z branży fizjoterapii i rehabilitacji. Produkty firmy pokrywają proces opieki nad pacjentem od prewencji urazowej do rehabilitacji pooperacyjnej i dolegliwości związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi. Cel ten jest osiąganym na drodze wykorzystania efektu synergii wielu firm rehabilitacyjnych skupionych „pod jednym parasolem”. DJO to **Dom Dobrych Marek**.

AIRCRAFT

CefarComplex
ADVANCED PROSTHESES FOR A BETTER LIFECHATTANOOGA
GROUPDJO
surgical

DONJOY

Empti

ORMED

PROCARE





Stoły terapeutyczne z serii Region

- 1** | Wprowadzenie
- 3** | Stoły Region 2
- 5** | Stoły Region 3
- 7** | Stoły Region 7



REGIONTM

Mocna konstrukcja mechaniczna

- stalowa konstrukcja ramy nośnej utrzymuje stabilność stołu zarówno w czasie terapii jak i przy schodzeniu i wchodzeniu pacjenta
- mechanizm nożycowy zapewnia równy ruch podnoszący z obciążeniem max. do 204 kg
- mechanizm sterujący elektrycznym podnoszeniem łatwo dostępny na całym obwodzie stołu
- podnoszenie wybranych sekcji stołu wspomagane sprężynami gazowymi
- koła jezdne opuszczane i podnoszone dźwignią

Szybkie dostawy

- modułowa konstrukcja, nowy sposób wytwarzania i pakowania definiuje od nowa dotychczasowy standard sprzedaży i dystrybucji stołów, pozwalając na dostawę do klienta w przeciągu dni, a nie tygodni czy miesięcy od daty zamówienia

Jednolita tapicerka leżyska wykonana z pianki i skin

- rewolucyjna koncepcja wykorzystania materiału poliuretanowego, o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego lateksu, łatwego do utrzymania w czystości
- unikalny kształt leżyska, z lekkimi zaokrągleniami elementów tapicerki, dający pacjentowi większe poczucie bezpieczeństwa
- niewiarygodny komfort dla pacjenta, przy jednoczesnym zachowaniu sprężystości odpowiedniej do wykonywania technik manualnych
- 7-9 razy większa wytrzymałość w porównaniu z tradycyjną tapicerką

Wyrafinowane wzornictwo

- nowoczesny styl stwarza innowacyjny wizerunek kliniki
- inspirująca kolorystyka pokrywa się z najnowszymi trendami wzornictwa i dekoracji wnętrz
- optymalna ergonomia – brak uchwytów i pokręteł przeszkadzających terapeutę przy pracy; elementy tapicerki zaprojektowane z myślą o wygodzie pacjenta
- otwarta przestrzeń przy ramie nośnej stołu ułatwia dostęp dla podnośników i lamp grzewczych



Kliniczne doświadczenie firmy Chattanooga

Spotkanie stylu, jakości i innowacji

STÓŁY TERAPETYCZNE REGION



i-Skin



SAND



SAGE



SUNFLOWER



TERRA COTTA



PACIFIC BLUE



MAROON



CHOCOLATE



MIDNIGHT

**Więcej niż zwykłe leżysko...**

Leżysko typu i-skin wykonane jest z pianki o stałej gęstości, nie zawierającej lateksu, zapewniającej komfort i większą stabilność dla pacjenta. Sama powierzchnia nie jest porowata, ma właściwości antybakteryjne i pomaga utrzymać czystą i wytrzymałą płaszczyznę dla terapii pacjenta. Czyszczenie jest bardzo proste. Wymaga jedynie wody z odrobiną łagodnego detergentu. Tapicerka tego typu jest aż do 9 razy bardziej wytrzymała niż tradycyjna. Drobne uszkodzenia mechaniczne można szybko naprawić przy pomocy kleju do tworzyw sztucznych.



- stół terapeutyczny 2-częściowy
- elektryczne podnoszenie w zakresie od 46 do 94 cm za pomocą pedałów dostępnych z każdej strony stołu
- możliwość wyboru tapicerki tradycyjnej lub tapicerki typu i-skin
- możliwość ułożenia pacjenta w obie strony pozwala rozwiązywać problem ograniczonej przestrzeni w małych gabinetach
- jedna część leżyska podnoszona przy użyciu sprężyny gazowej i za pomocą specjalnego uchwytu do kąta 80 stopni
- 4 podwójne koła jezdne opuszczane za pomocą dźwigni z ramy stołu



Region 2

Wersje Region 2

Region 2

3325 – stół Region 2

z tradycyjną tapicerką

3326 – stół Region 2 z tapicerką i-skin

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania: 230V / 1 A / 50 Hz
 Pobór mocy (jałowy): 7 W
 Waga (dł./szer./wys.): 104 kg
 Wymiary: 200 x 71 x 46-94 cm
 Wymiary transportowe ramy:
 152 x 74 x 63 cm
 Wymiary transportowe leżyska:
 69 x 16 x 108 cm
 Udźwig: 204 kg
 Klasa Bezp. Elektr.: Klasa II, typ B
 Testy bezpieczeństwa:
 IEC/UL/EN 60601-1, IEC 60601-1-1,
 IEC 60601-1-2

Kolorystyka – tapicerka i-skin




Kolorystyka – tradycyjna tapicerka



Regulacja stołu



Schemat stołu

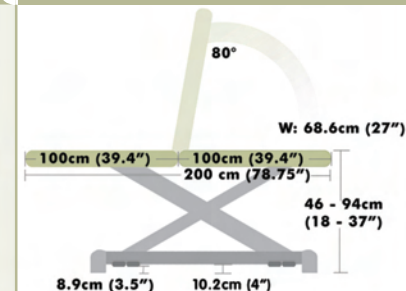

Region 3

- stół terapeutyczny 3-częściowy
- elektryczne podnoszenie w zakresie od 46 do 94 cm za pomocą pedałów dostępnych z każdej strony stołu
- regulacja zagłówka wspomagana sprężyną gazową
- tylna część leżyska podnoszona przy użyciu sprężyny gazowej i za pomocą specjalnego uchwyty do kąta 80 stopni
- leżysko z tapicerką typu i-skin
- 4 podwójne koła jezdne opuszczane za pomocą dźwigni z ramy stołu
- opcjonalna funkcja Pivot, sterowana elektrycznie za pomocą przycisków
- łatwe ustawianie pozycji Trendelenburga z szybkim podnoszeniem leżyska sprężynami gazowymi




Region 3



- Wersje Region 3**
- Region 3**
- 3330** – stół Region 3
- 3331** – stół Region 3D z funkcją Pivot
- Specyfikacja techniczna**
- Napięcie zasilania: 230V / 1 A / 50 Hz
 Pobór mocy (jałowy): 7 W
 Waga (dł./szer./wys.): 141 kg
 Wymiary: 200 x 71 x 46-94 cm
 Wymiary transportowe ramy: 152 x 74 x 63 cm
 Wymiary transportowe leżyska: 69 x 16 x 108
 Udźwig: 204 kg
 Klasa Bezp. Elektr.: Klasa II, typ B
 Testy bezpieczeństwa: IEC/UL/EN 60601-1, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2

- Kolorystyka – tapicerka i-skin**
- | | | |
|-------------|--------------|-----------|
| Sand | Sage | Sunflower |
| Terra Cotta | Pacific Blue | Maroon |
| Chocolate | Midnight | |

- Regulacja stołu**
-
- Schemat stołu**
-

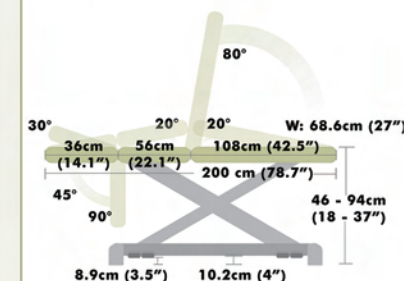


Region 7



- stół terapeutyczny 7-częściowy
- elektryczne podnoszenie w zakresie od 46 do 94 cm za pomocą pedałów dostępnych z każdej strony stołu
- niezależna regulacja dwóch elementów zagłówka wspomagana sprężyną gazową
- opuszczane boczne podpórki barkowe
- tylna część leżyska podnoszona przy użyciu sprężyny gazowej za pomocą specjalnego uchwytu do kąta 80 stopni
- leżysko z tapicerką typu i-skin
- 4 podwójne koła jezdne opuszczane za pomocą dźwigni z ramy stołu
- opcjonalna funkcja Pivot, sterowana elektrycznie za pomocą przycisków
- łatwe ustawianie pozycji Trendelenburga z szybkim podnoszeniem leżyska sprężynami gazowymi



Region 7

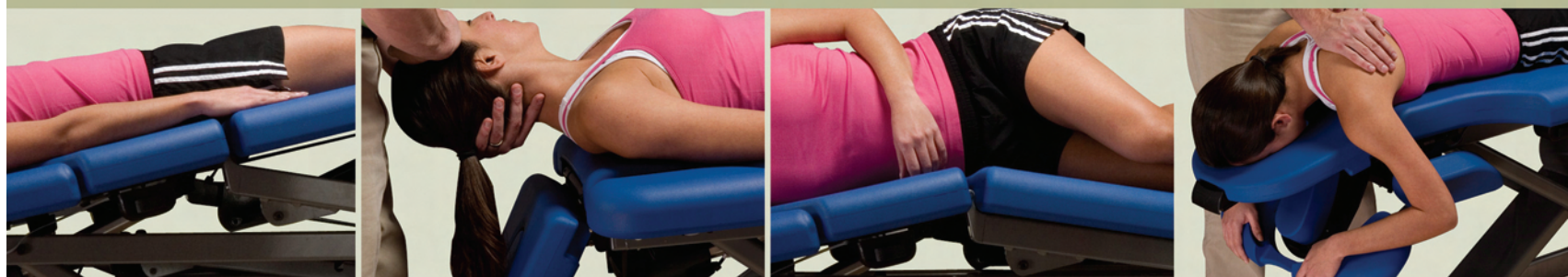

Wersje Region 7

Region 7

3334 – stół Region 7**3335** – stół Region 7D
z funkcją Pivot

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania: 230V / 1 A / 50 Hz
 Pobór mocy (jałowy): 7 W
 Waga (dł./szer./wys.): 141 kg
 Wymiary: 200 x 71 x 46-94 cm
 Wymiary transportowe ramy:
 152 x 74 x 63 cm
 Wymiary transportowe leżyska:
 69 x 16 x 108
 Udźwig: 204 kg
 Klasa Bezp. Elektr.: Klasa II, typ B
 Testy bezpieczeństwa:
 IEC/UL/EN 60601-1, IEC 60601-1-1,
 IEC 60601-1-2


Kolorystyka – tapicerka i-skin



Regulacja stołu



Schemat stołu

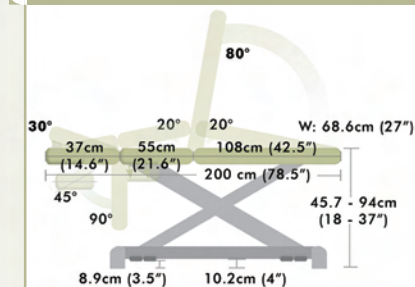



ACCURO SUMER
SPRZĘT DO FIZJOTERAPII

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Accuro - Sumer Sp. z o. o.
01- 217 Warszawa
ul. Kolejowa 15/ 17

tel.: +48 22 423 32 68
tel.: +48 22 423 28 12
fax: +48 22 862 02 96

www.accuro-sumer.pl
biuro@accuro-sumer.pl

